



## SM450-FF

### Audiomètre de diagnostic

(Tonale + Osseuse + Vocale + Champ libre)

Portable et simple à utiliser

Alimentation USB

Casque Peltor

#### Caractéristiques:

- Conduction aérienne
- Conduction osseuse
- Tests en champ libre
- Tests vocaux en temps réel
- Tests pré-enregistrés
- Test SISI
- Masking
- Compatible NOAH
- Archivage des données sur PC
- Configuration personnalisée

#### Description

Le SM450-FF est un audiomètre de diagnostic aérien, osseux et vocal.  
100% USB - sans alimentation supplémentaire.

Le logiciel AudioConsole fourni avec l'appareil permet à l'opérateur de commander et de personnaliser toutes les fonctionnalités de l'audiomètre.

Ergonomique, simple à utiliser et à transporter, le SM450-FF une solution complète pour les audioprothésistes et les ORL.

Cette configuration répond aux exigences réglementaires nécessaires pour un usage professionnel.

#### Med Gen Diagnostics & Metrology

14 rue des Briquetiers - 31700 Blagnac

11 rue des Moulins - 78500 Sartrouville

Téléphone : +33 (0)9 81 03 05 77

Télécopie : +33 (0)9 72 26 69 99

Email : [contact@med-gen.com](mailto:contact@med-gen.com)

[www.med-gen.com](http://www.med-gen.com)

## L'interface


Le logiciel Audioconsole fournit avec le SM450-FF permet de choisir deux modes de tests: Live Voice et fichiers WAV



Compatible NOAH



Le panneau de commande est très fonctionnel et intuitif ce qui permet de gérer toutes les options et de réaliser des examens en toute simplicité.

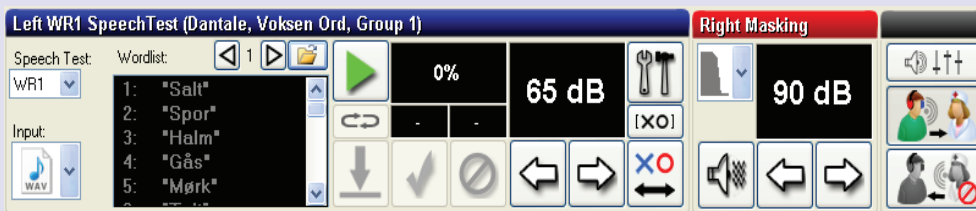

## Caractéristiques techniques

Fréquences (Hz) :	125 - 8000 Hz / -10dB à 110 dB (par pas de 5dB)
Tests avancés:	Conduction aérienne, conduction osseuse, vocale et champ libre
Audiométrie Tonale:	HL, MCL, UCL, binaurale
Audiométrie Vocale:	WR1, WR2, MCL, UCL, binaurale
Masking:	Bande étroite, Bruit Blanc, Speech Noise
Test SISI :	Calcul automatique du résultat
Test Hughson Westlake:	Seuil automatique
Compatibilité NOAH	pour une simple intégration
Test manuel ou automatique:	Son pulsé ou modulé
Compatible Windows:	98/2000/ME/XP/7
Poids:	508 g

## L'audiomètre livré comprend:

Casque Peltor, conduction osseuse B-71 et enceintes Edifier MP210 (70dB)

Réponse patient et câble USB

Logiciel AudioConsole

Garantie 2 ans

(En option: Casque opérateur, microphe, enceintes Berringer MS16 / 80 dB)

Med Gen Diagnostics & Metrology

14 rue des Briquetiers - 31700 Blagnac

11 rue des Moulins - 78500 Sartrouville

Téléphone : +33 (0)9 81 03 05 77

Télécopie : +33 (0)9 72 26 69 99

Email : contact@med-gen.com

www.med-gen.com